

Автоклавы Millennium класс



автоклав **Millennium** класс **В**



Оптимизированная, тщательно проверенная, испытанная и надежная конструкция автоклавов **Millennium** позволяет выбрать конфигурацию, оптимально подходящую вашим потребностям, обеспечивая высокие стандарты безопасности, скорости и удобства.

Современная система фракционного вакуума позволяет полностью устранить воздух из полостей и пористых материалов и провести заключительную фазу сушки с полным вакуумом.

Благодаря использованию в автоклаве эксклюзивного генератора пара, эффективной гидродинамической схеме и электронного управления, гарантируется высокая скорость выполнения процессов и полная стабильность термодинамических параметров.

- ▶ 4 программы стерилизации + 1 программа (конфигурируется пользователем)
- ▶ 2 тестовые программы: Helix/V&D тест и вакуумный тест (проверка герметичности)
- ▶ бактериологический фильтр, 2 резервуара для воды: чистой (дистиллированной) и отработанной
- ▶ встроенный USB порт
- ▶ Com порт Rs232 для подключения к принтеру (опция)
- ▶ система мгновенной генерации пара
- ▶ полностью микропроцессорное управление

Комплектуется дополнительно 3 поддонами из нержавеющей стали для инструментов



ДИСПЛЕЙ

яркий, широкий,
многоязычный ЖК-дисплей
(в том числе на русском языке)




КАМЕРА

камера из нержавеющей стали
4 поддона или 3 закрытые кассеты



ДВЕРЦА

электронный замок дверцы с
механической блокировкой

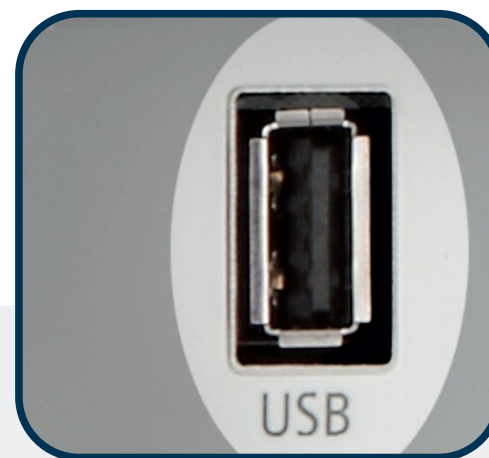

USB-port

возможность цифровой записи цикла
через USB-port



Автоматические электронные автоклавы класса

В



Отличный выбор!

Технические параметры

Millennium B | Millennium B2

Программы стерилизации	4 стандартные программы +1 определяется пользователем	
Напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Мощность	2300Вт	2300Вт
Внешние размеры	480*420*560 мм	480*420*660 мм
Масса	58 кг	63 кг
Водный резервуар	6-10 циклов	6-10 циклов
Размер камеры	230*350 мм	250*450 мм
Объем камеры	17 л	22 л