



swident 
WE SUPPORT YOUR PROFESSION



МЫ ПОМОГАЕМ РАЗВИТИЮ ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ

Задача компании Swident - эффективная поддержка профессионалов. На сегодняшний день профессионалы-стоматологи находятся в поисках идеальной концепции, способной воплотить в себе решение многих задач. Их требования сводятся к отличным рабочим характеристикам, превосходной эргономике, эффективной системе очистки, высокому качеству и надежности оборудования. Partner - стоматологическая установка в полной мере удовлетворяющая этим требованиям.

Partner предназначен для профессионалов, желающих работать с наилучшими из доступных технологий, обладающими современным дизайном и обеспечивающими легкое взаимодействие между врачом, пациентом и ассистентом.

Partner помогает развитию вашей профессии.

Partner - это средство реализации вашего мастерства.

swident 
WE SUPPORT YOUR PROFESSION



Наклон спинки осуществляется синхронизированными движениями элементов кресла, что позволяет обеспечить устойчивую поддержку пациенту и при необходимости довести кресло до нужного положения.



Partner снимает напряжение со спины пациента, обеспечивает прочную опору для поясницы.

ДИЗАЙН: ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКРЕПЛЕННАЯ СТИЛЕМ

Оптимальное сочетание современного стиля, эргономики и комфорта создает идеальные условия для профессиональной работы. Кресло имеет форму, сконструированную таким образом, чтобы обеспечить удобное положение тела пациента.

Гладкая, мягкая и прочная поверхность спинки позволяет пациенту чувствовать себя максимально комфортно в любом положении кресла. Обивка изготовлена из эластичного полиуретана без швов, благодаря чему легко обрабатывается.

Кресло имеет 3 программируемых положения + 1 дополнительную программу для подъема с возвратом в рабочее положение.

Нажатием кнопки кресло быстро и плавно принимает положение Тренделенбурга, затем также легко возвращается в рабочее положение.

Грузоподъемность кресла 135 кг.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Partner облегчает взаимодействие между врачом и ассистентом. Partner снижает напряжение врача, ассистента и пациента во время приема. Partner обладает превосходными рабочими характеристиками, комфортом и безопасностью, идеальным сочетанием стиля, эффективности и качества.

Этот результат достигнут благодаря нестандартным решениям и удачному выбору материалов.

*Когда пациент расслаблен и чувствует себя удобно
врачу работается проще и легче.*



ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Благодаря своему дизайну, технологии и гигиенической безопасности, Partner обладает надежностью, эффективностью и оказывает большую помощь зубо­врачебному персоналу клиники в его ежедневной практике.



ОТКИДНОЙ ПРАВЫЙ ПОДЛОКОТНИК
(ОПЦИЯ)





Управление стоматологической установкой производится с помощью микропроцессоров.

БЕЛЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ



ХРОМИРОВАННЫЙ



Вы можете выбрать тип подлокотника



Подголовник с двойной артикуляцией позволяет очень точно и легко установить и зафиксировать идеальное положение головы пациента.

Подголовник способен выдвигаться на 230 мм и перемещаться в двух плоскостях.



Двойное сочленение подголовника в сочетании с удобной формой спинки обеспечивают удобное и правильное положение пациентов невысокого роста и детей.

ДВОЙНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ
ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



BIOS: КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пневматический подголовник Bios имеет 3 плоскости вращения и способен выдвигаться на 230 мм. Bios легко регулируется и фиксируется, позволяя быстро найти максимально удобное положение головы пациента как для врача, так и для самого пациента.

ПОДГОЛОВНИК BIOS PNEUS
(ОПЦИЯ)



Благодаря пневматическому механизму Bios стало возможным легко и быстро перемещать, подгонять и фиксировать подголовник в оптимальном положении без использования неудобных резьбовых соединений.



Подголовники Bios помогают поддерживать необходимое положение спины и шеи. Благодаря Bios врач может работать в любом положении с наибольшей устойчивостью и точностью.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Компания Swident разработала технологию, предназначенную для достижения максимального результата. Длинные шланги инструментов, превосходно сбалансированные рукоятки, система поддержки модулей Partner позволяют врачу во время работы всегда держать инструменты под рукой. Инструментальные шланги обеспечивают врачу плавность и легкость движений во время работы с инструментами, обладают высокой подвижностью и широким радиусом действия. Панель управления имеет ровную гладкую поверхность, изолированную прозрачной мембраной - это новый уровень инфекционной безопасности при управлении стоматологической установкой.

Вы можете настроить по своему желанию встроенное оборудование и при необходимости установить дополнительные инструменты.





МОДУЛЬ ВРАЧА

- Подключение до 5 инструментов: 3-х функциональный шприц, микромотор, турбина, ультразвуковой скалер, светополимеризационная лампа (возможно подключение других инструментов)
- Простое программирование функций инструментов, стоматологической установки и кресла пациента.
- Простое многофункциональное управление
- Управление + индикация системой дезинфекции.
- Управление + индикация скорости вращения микромотора.
- Управление + индикация интенсивности вибрации ультразвукового скалера.
- Управление + индикация подсветки инструментов.
- Управление + индикация функции обратного вращения микромотора.
- 4 программируемые позиции кресла + ручное управление движениями элементов кресла
- Управление системой наполнения чаши плевательницы
- Выключатель операционного светильника



ГИГИЕНИЧНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ НАКЛАДКИ

Съемное силиконовое покрытие инструментального блока врача и операционной рукоятки вы можете стерилизовать в автоклаве. Панель управления покрыта прозрачной мембраной, благодаря чему легко очищается.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Все основные функции Partner активируются системой ножного управления. Педаль управления Partner имеет дополнительные кнопки управления движениями кресла, дублирующими пульт управления врача. Это обеспечивает высокий уровень гигиены, экономит время и позволяет врачу полностью сконцентрироваться на работе с пациентом.

ПРОСТОТА И ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Поверхность инструментального блока ассистента закреплена на двойном шарнирном манипуляторе, ровная и твердая, что ускоряет процедуру стерилизации. Модуль ассистента имеет угол поворота 200°, что обеспечивает легкий доступ к инструментам и кнопкам управления. Панель управления ассистента изолирована прозрачной мембраной, позволяет быстро управлять функциями наполнения стакана и смыва плевательницы.





МОДУЛЬ АССИСТЕНТА

Модуль ассистента закреплен на двойном шарнирном манипуляторе, оснащен панелью управления изолированной прозрачной мембраной. В распоряжении ассистента кнопки управления движениями кресла пациента, установки кресла в одну из 4 программируемых позиций, активации систем наполнения стакана и смыва чаши плевательницы. Для максимально эффективного взаимодействия врача и ассистента, модуль оснащен 2 держателями (для хирургического пылесоса и слюноотсоса) и 1 держателем для дополнительного инструмента (2-го шприца или светополимеризационной лампы). Панель управления легко очищается, съемная рабочая рукоятка стерилизуется в автоклаве.



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Отличительной особенностью Partner является система полной внутренней и внешней инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала. Все фильтры имеют широкую рабочую поверхность, благодаря чему они максимально эффективны в процессе эксплуатации. Аспирационный фильтр легко доступен извне, что существенно облегчает процедуру его очистки или замены.



ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Система шлангов и соединителей Partner разбирается и стерилизуется.

БОЛЬШЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Благодаря компактной конструкции гидроблока и плевательницы с углом поворота до 180°, Partner обеспечивает врача большим рабочим пространством. Это означает, что врачу теперь доступно больше рабочих решений.

Поверхность Partner изготовлена из технополимеров, чрезвычайно устойчивых к химическим дезинфицирующим средствам.





ГИГИЕНА

Чаша плевательницы и её опорная стойка выполнены из высококачественной керамики. Чаша плевательницы, канюли систем наполнения стакана и смыва плевательницы легко снимаются для стерилизации в автоклаве.



ПРОСТРАНСТВО И ГИГИЕНА

В керамической чаше плевательницы полностью отсутствуют швы и стыки, что предотвращает загрязнение поверхности бактериями. Возможность поворота на 180° обеспечивает максимум пространства и позволяет пациенту чувствовать себя комфортно.



АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ (опция)

Автономная система подачи воды представляет из себя герметичный резервуар, заполняемый дистиллированной водой (или дезинфицирующим раствором) и используется в качестве альтернативного источника подачи жидкости к инструментам врача и ассистента.

Автономная система подачи воды эффективно устраняет перекрестное загрязнение, гарантируя гигиеничность рабочих мест врача и ассистента, а также кресла пациента.


КОМПОНОВКА

Благодаря цифровой технологии, Partner может быть оснащен мультимедийной системой. Теперь по изображению на мониторе пациент может увидеть состояние своих зубов.

- Улучшается взаимосвязь между пациентом и врачом.
- Быстро передается информация.
- Ускоряется взаимодействие между врачом и пациентом.
- Наглядно отображается степень поражения зуба и необходимого лечебного вмешательства.



Общайтесь, делитесь информацией, выстраивайте отношения с Вашим пациентом.

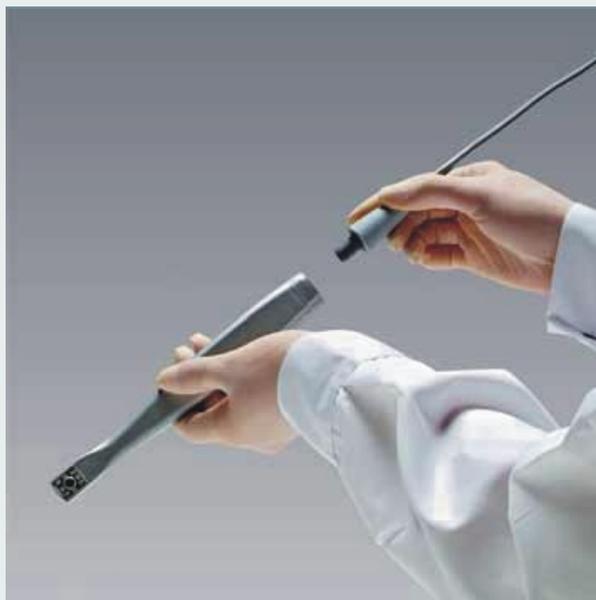


ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА SWIDENT CAM

Интраоральная камера SWIDENT CAM позволяет получать внутри- и внеротовое изображение. Она может быть интегрирована на инструментальном блоке врача или ассистента, а монитор легко размещается на стойке операционного светильника. Камера оснащена быстросъемным соединением, работающим с различными рабочими станциями.



СВЕТОДИОДНАЯ КАМЕРА SWIDENT CAM

Светодиодная камера SWIDENT CAM имеет фундаментальное преимущество перед оптоволоконной: подсветка осуществляется 8 светодиодами высокой интенсивности, камера очень проста в управлении.

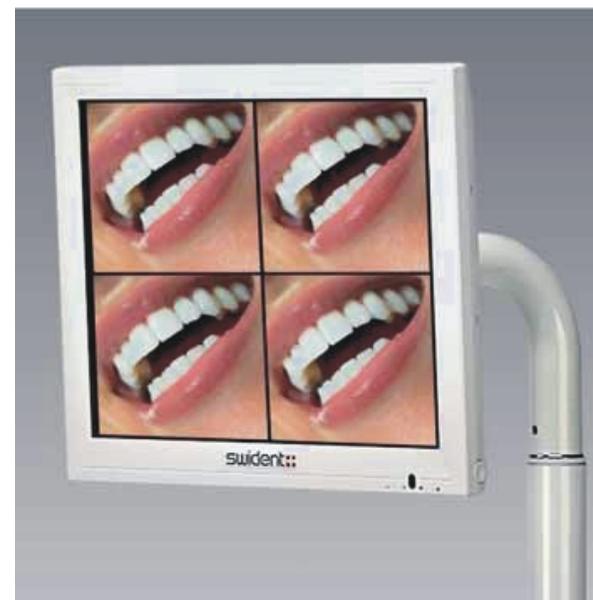


МОНИТОР

Функция "4 картинки в 1-й" позволяет получать изображение во весь экран или на 4-х изображениях отдельно.

SWIDENT CAM совместима с персональными компьютерами на платформах Mac и PC.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Partner позволяет стоматологам комфортно работать с пациентом, перемещаясь вокруг установки в диапазоне от 8 до 2 часов без помех с максимально удобными условиями для пациента. Благодаря нестандартным решениям и удачно подобранным материалам (чрезвычайно стойким к изнашиванию), компания Swident гарантирует высокую надежность стоматологической установки, легкое и быстрое техническое обслуживание, безопасность и комфорт. Partner - долговечный продукт обеспечивающийся технической поддержкой компанией Swident Point, а также уполномоченными представителями в Вашем регионе.

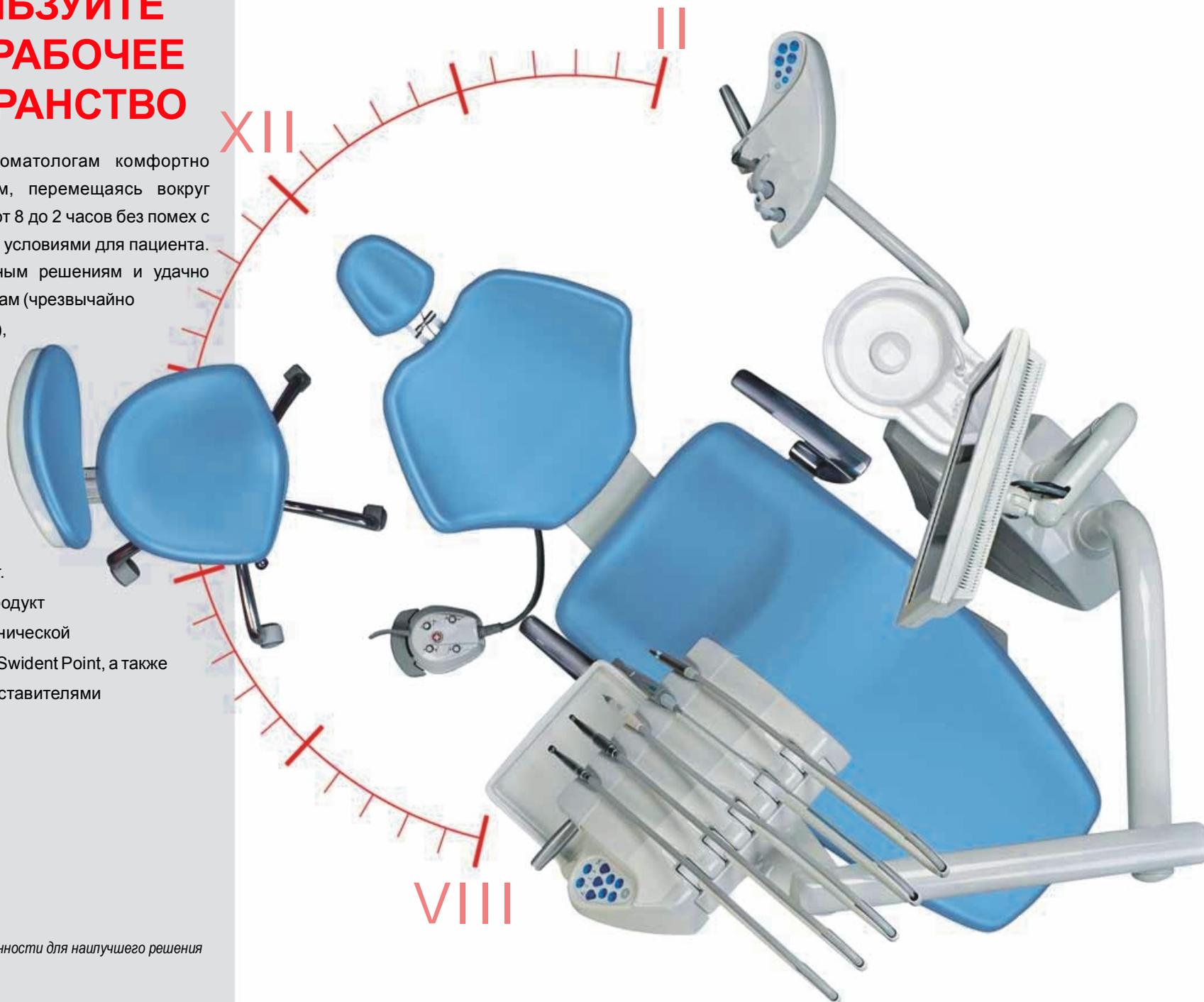

Станьте партнером уверенности для наилучшего решения



ОПЕРАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWIDENT EDI

EDI можно вращать в двух плоскостях и освещать ротовую полость с разных углов.

EDI оснащена прямым съемным экраном для облегчения процесса очистки и бесшумным вентилятором, расположенным сзади.

- Интенсивность света - 25000 люкс
- Цветовая температура - 5000° Кельвин
- Размер пространства, освещаемого лампой - 60x180 мм
- Вращение в двух плоскостях
- Регулировка интенсивности света
- Съемный легко чистящийся защитный экран
- Съемные автоклавируемые ручки



ОПЕРАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWIDENT RNA

RNA может вращаться в трех направлениях и освещать ротовую поверхность с любого угла. RNA работает в 3 различных световых режимах.

- Бесшумный вентилятор, расположенный сзади.
- 3 уровня регулируемой интенсивности света. (22000 люкс / 36000 люкс / 40000 люкс).
- Цветовая температура 4700° Кельвин.
- Размер пространства, освещаемого лампой - 60x180 мм.
- Возможность вращения в 3 направлениях.
- Съемные автоклавируемые ручки.



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Partner оснащен Системой Безопасной Подачи Воздуха (SAS). SAS препятствует проникновению загрязненного воздуха в дыхательные пути пациента, после окончания работы механически очищает поверхность инструмента. Обращаем ваше внимание, что воздушный поток, поступающий от вращающихся инструментов, пропускается через высокоэффективный сухой воздушный фильтр, значительно снижающий вероятность перекрестного загрязнения.

КОМФОРТ И КАЧЕСТВО



SYNCRO T5

Анатомический стул для врача-стоматолога

Благодаря анатомической конфигурации и механизмам синхронизации движений элементов стула врач может длительное время находиться в наиболее удобном положении, избежать соскальзывания вперед и обеспечить оптимальную поддержку спины в области поясницы.

- Высота стула регулируется в пределах 47-60 см.
- Максимальный угол наклона спинки - 25°.
- Синхронный механизм стула изменяет положение спинки и сиденья в зависимости от положения врача.
- Все регулировки выполняются одним рычагом.
- Пружинящая спинка стула находится в постоянном контакте со спиной врача.
- Обивка не имеет швов и легко дезинфицируется.
- Стул может быть оснащен опорой для ног (опция).

ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА



Благодаря анатомической конфигурации и механизмам синхронизации движений элементов стула врач может длительное время находиться в наиболее удобном положении, избежать соскальзывания вперед и обеспечить оптимальную поддержку спины в области поясницы.

- Высота стула регулируется в пределах 47-60 см.
- Максимальный угол наклона спинки - 25°.
- Синхронный механизм стула изменяет положение спинки и сиденья в зависимости от положения врача.
- Все регулировки выполняются одним рычагом.
- Пружинящая спинка стула находится в постоянном контакте со спиной врача.
- Обивка не имеет швов и легко дезинфицируется.
- Стул может быть оснащен опорой для ног (опция).

SYNCRO T3

Анатомический стул для врача-стоматолога



НАДЕЖНАЯ ОПОРА



ASSIST
Анатомический стул для ассистента

Круглая форма сидения и эргономичная спинка, которую удобно использовать в качестве подлокотника, позволяют ассистенту работать наиболее эффективно.

- Высота кресла регулируется в пределах 47-60 см.
- Обивка стула не имеет швов и легко обрабатывается дезинфицирующими средствами.
- Стул может быть оснащен опорой для ног (опция).

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

О Б И В О Ч Н О Г О М А Т Е Р И А Л А

- Бесшовный, легкоочищаемый обивочный материал из искусственной кожи надежно прослужит вам в течении длительного времени.
- Обивочный материал для стоматологических установок Swident создает пациенту комфортные условия даже во время длительного сеанса лечения.

ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА



- Представленные в данной таблице цвета могут не вполне точно соответствовать оригинальным
- Спрашивайте у торгового представителя образцы обивочного материала



swident 
WE SUPPORT YOUR PROFESSION

SWIDENT SWITZERLAND

Via G. Cattori, 3 CH 6902 Paradiso - Lugano
www.swident.ch

SWIDENT ITALY

Via Cicogna, 34/ A - 40068
San Lazzaro di Savena - Bologna (Italy)
www.swident.it